


UNITS DENTAIRES

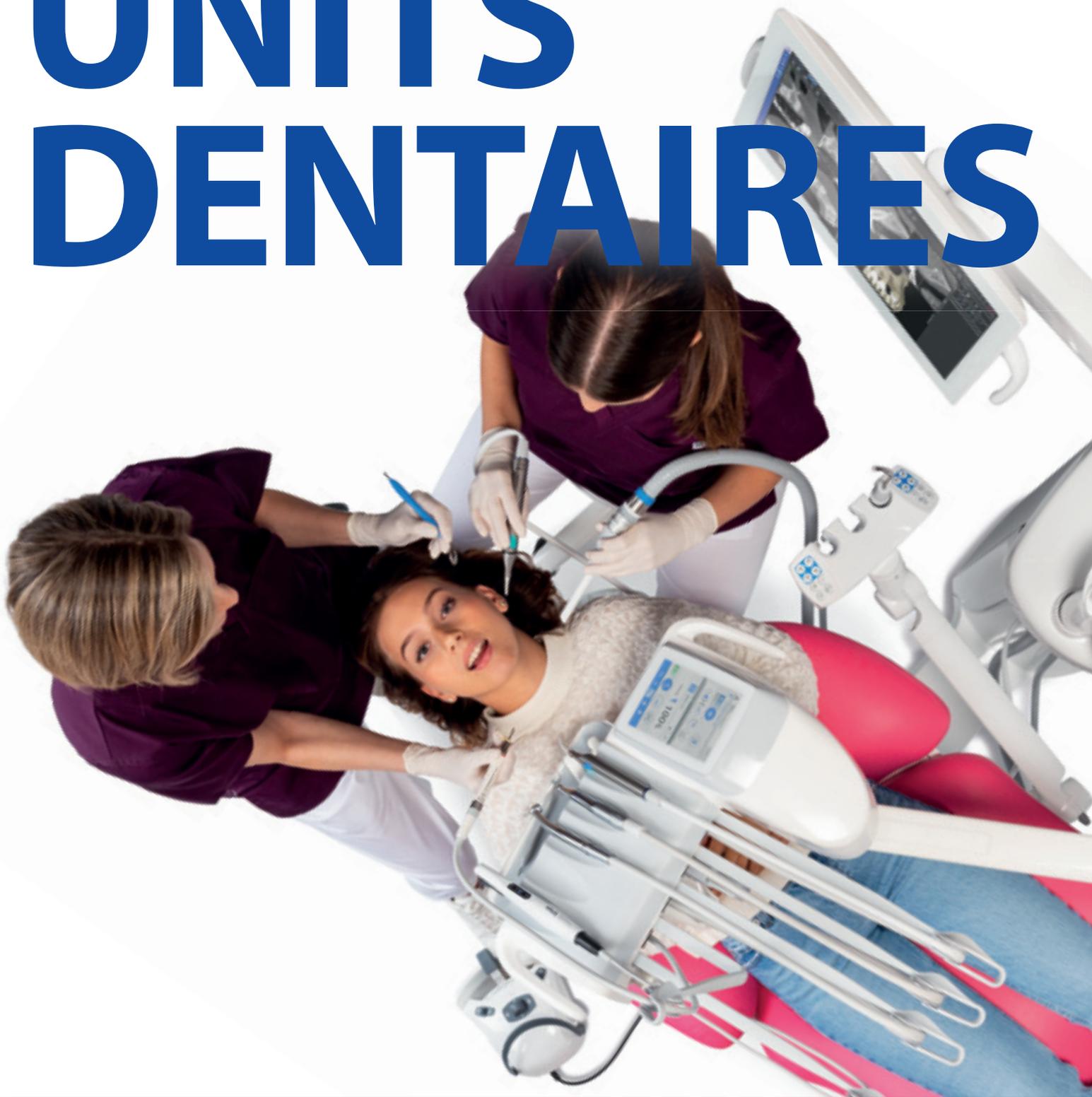

Units dentaires Planmeca – conçus pour une meilleure prise en charge du patient	4
La facilité d'accès et le confort en consultation	6
Ergonomie idéale	8
Un patient détendu	10
Conçus pour durer	12
Tout est dans le détail	14
Démarez-vous grâce aux couleurs	16
Le contrôle des infections est une priorité suprême	18
Utilisation optimisée de l'équipement avec Planmeca Insights™	20
Choisissez votre meilleur collaborateur	22
Planmeca Pro50™	24
La nouvelle génération premium d'units dentaires	24
Planmeca Compact™ i5	26
Destiné à la performance, conçu pour durer	26
Planmeca Compact™ i Classic	28
Le classique moderne de la dentisterie	28
Planmeca Compact™ i3	30
Compact, rapide et ingénieux	30
Planmeca Pro50™ Chair	32
Offrez à vos patients le confort haut de gamme	32
Caractéristiques techniques	34

Qualité exceptionnelle et conception ergonomique

Présentation de notre président



« Je suis heureux de vous présenter notre gamme exceptionnelle d'units de soins dentaires, combinant ce que l'ergonomie offre de mieux et un remarquable confort du patient. Je suis vraiment fier de nos innovations produits ; pendant près d'un demi-siècle, nous avons travaillé en étroite collaboration avec des professionnels de la dentisterie pour créer des units dentaires de pointe qui définissent de nouvelles normes dans notre domaine.

Ce qui nous distingue, c'est que l'ensemble de la mise au point et de la production des produits a lieu en Finlande, ce qui garantit une qualité inégalée et un soin du détail à toutes les étapes du processus. Notre but est de sécuriser votre travail et de le rendre plus agréable, tout en assurant à vos patients la meilleure expérience de traitement possible.

Nous nous appuyons en outre sur une équipe dévouée de professionnels de la recherche et du développement, se consacrant tous à livrer des produits de la meilleure qualité qui soit pour répondre à vos besoins cliniques. Je suis donc impatient de vous faire découvrir nos units de soins dentaires de haute technologie afin que vous trouviez celui qui vous conviendra parfaitement. »

Heikki Kyösti
Président et fondateur
Planmeca Group

Units dentaires Planmeca – conçus pour une meilleure prise en charge du patient

Renommés pour leur esthétique, leur durabilité et leur ingéniosité technique, les units dentaires Planmeca sont conçus pour le patient et pour l'équipe dentaire. Notre département en charge du développement des produits s'appuie toujours sur quatre critères essentiels : l'ergonomie, la sécurité, le confort et l'esthétique. Grâce au respect de ces critères dans tout ce que nous entreprenons, nous avons pu créer des solutions qui permettent aux dentistes de se concentrer sur leur travail et de fournir les meilleurs soins aux patients en laissant la technologie s'occuper du reste. Nous vous invitons à découvrir les qualités exceptionnelles qui constituent le dénominateur commun de tous nos units dentaires.



La facilité d'accès et le confort en consultation

Nos units dentaires offrent une facilité d'accès aux patients de tout âge et de toute taille, et assurent une position confortable lors des consultations pré et post-traitement.



Facilité d'installation/sortie

Le repose-jambes rabattable permet au patient de s'installer dans le fauteuil et d'en sortir facilement – une caractéristique particulièrement importante dans le cas de patients plus âgés ou souffrant d'un handicap. Le fauteuil peut également être doté d'accoudoirs pivotants, permettant au patient de s'installer sur le fauteuil et d'en sortir encore plus facilement.

Consultation en face à face

Nos units dentaires vous permettent d'avoir un entretien initial en vis-à-vis avec votre patient confortablement assis. Ceci contribue à détendre l'atmosphère et à inspirer confiance au patient. Les éléments de distraction comme la console d'instruments restent hors du champ de vision du patient.

Ergonomie idéale

Nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels de la dentisterie afin de garantir un confort maximum et un flux de tâches fluide. Nos unités dentaires vous permettent de travailler à deux ou à quatre mains, tout en garantissant une bonne ergonomie, ce qui facilite votre travail et le rend plus efficace.

Aide à l'ergonomie du flux de travail

Nos unités dentaires ont été conçus pour rendre le quotidien plus facile, plus confortable et moins stressant. L'absence de base sous le fauteuil, l'étréouissement du dossier, ainsi que la petite taille de la base du crachoir permettent un accès optimal à la zone de traitement et facilitent le maintien d'une position de travail ergonomique durant toute la journée, sans mouvements ni contraintes inutiles. Les mouvements amples et fluides de bras de distribution vous permettent de choisir la position la plus appropriée, tandis que le parfait réglage des fouets garantit une utilisation ergonomique des instruments puisque seuls de petits mouvements sont nécessaires pour les utiliser. Ceci limite les contraintes sur votre bras, votre poignet et votre épaule.

La position de travail de votre choix – une adaptabilité parfaite

- Idéal pour la dentisterie à deux ou à quatre mains
- S'adapte à toutes les positions, de 7 heures à 3 heures
- Permet de travailler assis ou debout



Un patient détendu

Conçus pour
le confort

Grâce à nos innovations exceptionnelles, les séances de soins se déroulent dans une ambiance plus confortable et décontractée pour vos patients, facilitant ainsi votre travail. Avec la précision de positionnement et le soutien qu'ils assurent, nos units dentaires vous permettent de vous concentrer sur votre travail et d'assurer un traitement clinique de la meilleure qualité possible.

Fauteuil de conception ergonomique

Le design du fauteuil suit les courbes du corps du patient et lui apporte un soutien ferme et confortable. Nos units dentaires peuvent également être dotés d'accoudoirs pour garantir un soutien supplémentaire au patient.

Confort inégalé pour le patient

La garniture **Ultra Relax™** de Planmeca répond au poids et à la chaleur corporelle du patient, pour lui assurer un confort supérieur. Ceci est particulièrement appréciable dans les séances de traitement prolongées. Un patient confortablement installé est plus détendu, ce qui vous permet de vous concentrer sur le traitement clinique.

Conçus pour durer

Notre profond engagement dans la recherche et le développement nous guide dans tout ce que nous faisons. Nous avons la passion du design et faisons toujours passer le confort, la sécurité et la simplicité d'utilisation avant tout le reste. Et cela, sans faire de compromis. Nos unités dentaires, parmi les plus performants du marché, sont pratiques, fonctionnels et superbement conçus.

**Aluminium
résistant, durable
et recyclable**

Design allégé

Tous les unités dentaires Planmeca sont dotés de notre design épuré distinctif. Avec suffisamment d'espace libre de chaque côté, nos unités extrêmement compacts permettent à l'équipe soignante de travailler dans le confort et en toute liberté dans les positions de leur choix.

Surfaces brillantes, excellente durabilité

Nous utilisons des pièces en aluminium et une finition à la peinture époxy sur nos unités dentaires afin d'assurer une durabilité extrême. Leurs surfaces lisses dotées d'un revêtement poudré répondent aux exigences les plus strictes en matière de contrôle des infections.

Parfaite modularité

Tous nos unités ont été conçus en pensant à l'avenir. C'est pourquoi il est facile de les compléter avec les dernières fonctionnalités et innovations en matière de dentisterie.

Conception primée

Notre but est de créer des produits durables, superbement conçus, résistants à l'épreuve du temps, en portant par ailleurs une attention inégalée au détail. Chaque produit que nous fabriquons est de la plus grande qualité, ce qui contribue à transmettre une image professionnelle de votre cabinet dentaire, inspirant confiance au patient.



reddot winner 2020

FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



reddot award 2016
winner

Tout est dans le détail



Accès facilité au dossier du patient

Toutes les données cliniques sont facilement accessibles, ce qui rend la constitution et la consultation du dossier du patient simples et efficaces.

Champ lumineux étendu

Le scialytique **Planmeca Solanna**® offre une excellente visibilité dans les moindres recoins du champ opératoire.

Confort des positions de travail

La vaste plage de réglages en hauteur vous permet de travailler confortablement debout, tandis que la position très basse du fauteuil permet également de traiter les patients en position semi-allongée.

Vaste espace disponible

La base compacte du fauteuil et le crachoir à dimensions réduites offrent au dentiste et à son assistante un plus grand espace pour leurs jambes, permettant ainsi une approche maximale du patient.

Conception ingénieuse de la console d'instruments

Le positionnement sans effort de notre console permet de placer les instruments dans une position ergonomique optimale. La console peut également être déplacée du côté assistante pour un travail fluide et efficace. Les instruments à connecteurs rapides sont facilement interchangeables par l'utilisateur.

Facilité d'accès aux paramètres personnels

Planmeca PlanID™ permet d'accéder aux paramètres personnels sur n'importe quel unit dentaire du cabinet en présentant simplement une carte.

Simplicité d'utilisation

L'écran tactile intuitif est simple et facile à utiliser, grâce à la personnalisation des positions de traitement, des paramètres et des pré-réglages des instruments.

Prise en main agréable, avec un minimum de tension

Les fouets hautement performants offrent un équilibre optimal et un soutien ergonomique pour l'utilisation des instruments avec un minimum de tension.

Repose-jambes rabattable

Le repose-jambes automatique permet au patient de s'installer sur le fauteuil et d'en sortir facilement, ce qui garantit la fluidité du travail. Idéal pour les consultations face-à-face et les actes de prothèse, il garantit également un excellent confort au patient.

Accès idéal et sans restriction

Le dossier, particulièrement étroit dans sa partie supérieure, permet à l'équipe soignante de se rapprocher au plus près de la zone de traitement.



Scialytiques Planmeca

Dans le domaine des soins dentaires, le moindre détail compte. C'est pour cette raison que le scialytique est un outil de travail incontournable. Nos scialytiques offrent un éclairage de qualité supérieure, une excellente ergonomie, des opérations hygiéniques sans contact avec les mains ainsi que de nombreuses fonctions intelligentes permettant un flux de tâches fluide.

Planmeca Solanna®

La visibilité parfaite sur toute la zone de traitement est assurée grâce à la luminosité et à la température de couleur de votre choix.



Planmeca Solanna® Vision

Ce scialytique intelligent, doté de caméras 4K et de microphones intégrés, vous permet d'obtenir facilement des images fixes ainsi que des vidéos. C'est une excellente solution pour la documentation, la consultation et la communication.



Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur tous les modèles d'unit dentaires. Consultez le tableau de comparaison à la page 35 pour obtenir des détails complémentaires.

Démarquez-vous grâce aux couleurs

Ajoutez au superbe design de votre unit dentaire une touche personnelle en choisissant vos couleurs préférées. Sélectionnez la couleur idéale dans notre vaste collection et créez le décor de vos rêves !

Garnitures de haute qualité pour un confort durable

La garniture **Comfy™** est fabriquée en cuir synthétique durable. Son épaisseur réduite assure un excellent accès à la zone de traitement, tandis que son design sans couture facilite l'entretien et améliore le contrôle des infections.

Fabriquée dans un cuir synthétique extrêmement durable avec un rembourrage en mousse viscoélastique à mémoire de forme, la garniture **Ultra Relax™** s'adapte parfaitement à l'anatomie du patient, lui permettant de rester détendu, même lors des séances de traitement de longue durée.

Couleurs attractives et lumineuses

Les garnitures Comfy et Ultra Relax sont toutes deux proposées dans une large gamme de coloris élégants.

Nos teintes métalliques ajoutent une touche d'éclat à l'unit dentaire. La collection Gem propose des couleurs qui reflètent la lumière, créant un effet luxueux. Les teintes métalliques ainsi que la collection Gem sont disponibles pour les garnitures Ultra Relax.



Fuchsia	Ultra Relax ✓	Comfy ✓
Cassis	Ultra Relax ✓	
Purple	Ultra Relax ✓	Comfy ✓
Red	Ultra Relax ✓	Comfy ✓
Carnival	Ultra Relax ✓	
Sun	Ultra Relax ✓	
Lime	Ultra Relax ✓	Comfy ✓
Green Bean	Ultra Relax ✓	
Metallic Pine	Ultra Relax ✓	
Petrol	Ultra Relax ✓	Comfy ✓
Sky	Ultra Relax ✓	Comfy ✓
Azure	Ultra Relax ✓	Comfy ✓
Steel Blue		Comfy ✓
Deep Sea Blue		Comfy ✓
Metallic Blue	Ultra Relax ✓	
Baltic	Ultra Relax ✓	
Dark Blue		Comfy ✓
Diplomat Blue	Ultra Relax ✓	
Gem Midnight Blue	Ultra Relax ✓	
Hazel		Comfy ✓
Walnut	Ultra Relax ✓	
Coffee		Comfy ✓
Metallic Gold	Ultra Relax ✓	
Metallic Sand	Ultra Relax ✓	
Gem Champagne Sparkle	Ultra Relax ✓	
Metallic Silver	Ultra Relax ✓	
Urban Grey		Comfy ✓
Graphite	Ultra Relax ✓	Comfy ✓
Black	Ultra Relax ✓	Comfy ✓
Gem Carbon Black	Ultra Relax ✓	

Le contrôle des infections est une priorité suprême

Le contrôle des infections et la propreté de l'eau ont toujours été des enjeux majeurs dans la conception et la mise au point de nos produits. Des années de collaboration étroite avec des universités dentaires réputées dans le domaine de la microbiologie nous ont conduits à proposer des solutions complètes, scientifiquement éprouvées, pour le contrôle des infections internes et externes de l'unit dentaire.



Contrôle externe des infections facilité

Les surfaces lisses et uniformes de nos units dentaires facilitent le nettoyage et garantissent un contrôle impeccable des infections externes. Les surfaces métalliques sont extrêmement durables et résistantes aux agents de nettoyage. Les composants cruciaux peuvent également être stérilisés en autoclave, et la cuvette peut être retirée pour un nettoyage facile.

De l'eau toujours propre

Nos solutions de traitement de l'eau assurent que l'eau pénétrant dans la bouche du patient est toujours propre, offrant ainsi un environnement plus sûr pour les patients comme pour l'équipe dentaire.

Résultats supérieurs pour tuyaux d'aspiration plus propres

Nous avons conçu un système novateur pour le nettoyage des tuyaux d'aspiration et des filtres. Le système de nettoyage des tuyaux d'aspiration Planmeca simplifie considérablement et automatise le processus de désinfection des units dentaires. Il assure ainsi la sécurité de l'environnement de traitement et améliore la propreté du système d'aspiration dans son ensemble.

L'efficacité du système de nettoyage Planmeca a été établie par une étude indépendante* réalisée à l'Hôpital universitaire dentaire de Dublin.

* Boyle MA, O'Donnell MJ, Russell RJ, Galvin N, Swan J, Coleman DC. Overcoming the problem of residual microbial contamination in dental suction units left by conventional disinfection using novel single component suction handpieces in combination with automated flood disinfection. Journal of Dentistry. 2015. 43(10):1268-1279. doi: 10.1016/j.jdent.2015.07.018. PMID: 26248229.

Utilisation optimisée des équipements avec Planmeca Insights™

Passez un nouveau cap en matière d'efficacité clinique grâce à des données exploitables et à l'intelligence de votre flotte d'équipements Planmeca. Que ce soit pour des appareils individuels ou des cabinets de groupe multisites, **Planmeca Insights™** offre des informations en temps réel sur leur état, leur utilisation et les besoins en maintenance.

Optimisation de la planification, de la formation et de la prise de décision

Une foule de données peuvent être utilisées pour confirmer que votre précieux équipement est entretenu correctement et conformément à la pratique convenue. En outre, les informations détaillées sur l'utilisation permettent de savoir comment et quand les appareils sont utilisés pour une prise de décision plus éclairée. Les protocoles de nettoyage spécifiques à chaque appareil peuvent être surveillés via la plateforme. Les données provenant de différents sites peuvent également être comparées pour une meilleure gestion clinique et des flux de travail optimisés.





Périodes d'inactivité des appareils minimisées

Il est possible de programmer des messages automatiques concernant l'état des appareils ou les problèmes rencontrés pour informer les bonnes personnes, comme le personnel de maintenance. Les données individuelles de l'appareil permettent d'optimiser les temps de maintenance et de résoudre les problèmes, avant même qu'ils ne surviennent. Si nécessaire, les journaux de l'appareil peuvent être consultés pour une analyse plus détaillée de son fonctionnement.

Planmeca Insights™ prend en charge l'ensemble des appareils Planmeca. Pour les unités dentaires Planmeca, la plateforme propose une gamme de fonctionnalités intelligentes, telles que

- État actuel et activité en cours de l'appareil
- Informations de maintenance
- Données d'utilisation
- Informations relatives au flux de travail
- Messages d'aide et d'erreur
- Surveillance des protocoles de nettoyage propres aux appareils

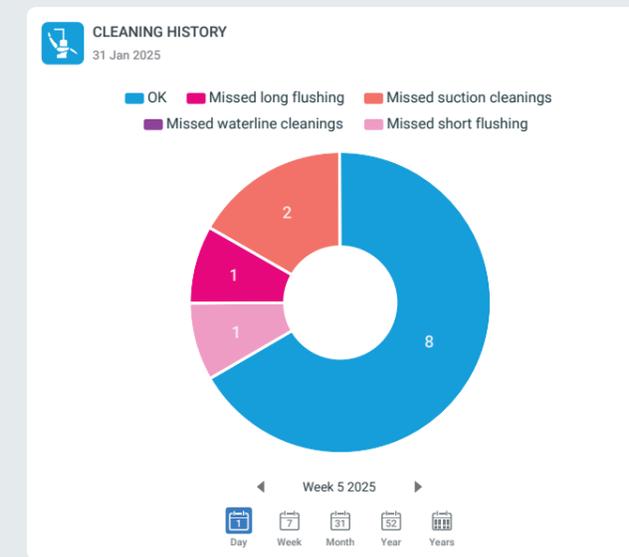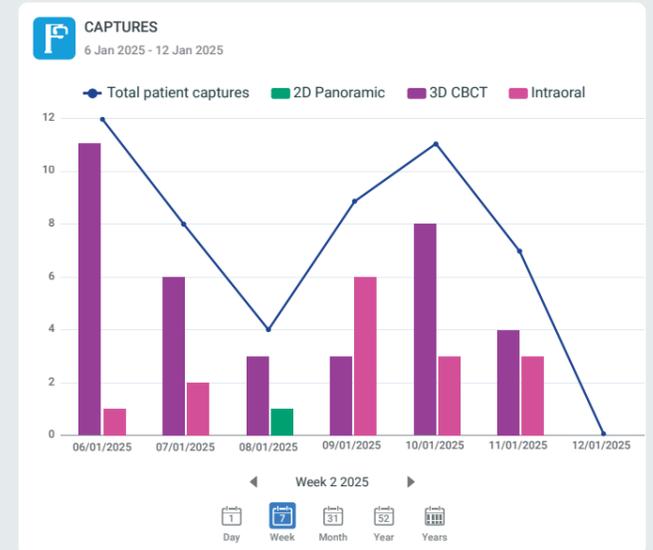

Choisissez votre meilleur collaborateur

Notre gamme révolutionnaire d'units dentaires et de fauteuils patient compte déjà des dizaines de milliers d'utilisateurs satisfaits à travers le monde. Elle continue d'évoluer pour répondre aux exigences de tout type de cabinet dentaire et de toutes les spécialités. Notre ligne de produits comprend cinq options, chacune conçue pour offrir la meilleure ergonomie à l'équipe dentaire et l'expérience de traitement la plus agréable qui soit aux patients de toute taille et de tout âge.



Planmeca Pro50™



Planmeca Compact™ i5



Planmeca Compact™ i Classic



Planmeca Compact™ i3



Planmeca Pro50™ Chair

Lequel vous convient le mieux ?

Planmeca Pro50™

Cet unit premium représente la nouvelle génération d'units dentaires, alliant technologies de pointe, ergonomie symétrique, qualité optimale et contrôle des infections dernier cri. Ses fonctionnalités intelligentes offrent à l'utilisateur une expérience haut de gamme.

Planmeca Compact™ i5

Planmeca Compact™ i5 est un unit dentaire à la fois épuré et élégant. La toute nouvelle génération de la gamme réputée Compact est conçue pour durer et fournir des performances de haut niveau.

Planmeca Compact™ i Classic

Le classique moderne de la dentisterie : un choix fonctionnel qui offre toutes les fonctions nécessaires à l'exécution d'un flux de tâches fluide et confortable.

Planmeca Compact™ i3

Notre plus petit unit, à encombrement réduit, permet aux professionnels des soins dentaires de travailler confortablement dans toutes les positions, qu'ils soient droitiers ou gauchers.

Planmeca Pro50™ Chair

Notre fauteuil patient, à la fois robuste et élégant, combine fonctionnalité, flexibilité et confort ultime pour le patient.



« Lorsque vous travaillez avec un unit dentaire exceptionnel, vous n'avez même pas à vous en préoccuper et vous ne vous concentrez que sur votre travail. La discrétion positive, voilà ce qui caractérise les units dentaires Planmeca.

Dr Johanna Kukila
Helsinki, Finlande

Planmeca Pro50™

La nouvelle génération premium d'units dentaires

Cumulant plus de 50 ans d'expérience dans la conception et la fabrication d'équipements dentaires, Planmeca s'engage à poursuivre son évolution et à garantir l'excellence de ses processus de fabrication. Le nouvel unit Planmeca Pro50™ est le résultat d'une constante évolution. C'est un unit dentaire qui ne ressemble à aucun autre.

Ergonomie dynamique

Le fauteuil à élévation verticale unique en son genre de l'unit Planmeca Pro50™ peut être réglé entre 39 cm et 89 cm de hauteur. De plus, le crachoir peut être pivoté d'un côté à l'autre du fauteuil, offrant ainsi une expérience de travail identique aux gauchers et aux droitiers. Cela permet aux professionnels des soins dentaires de travailler dans leur position préférée, qu'ils soient grands ou petits, assis ou debout.

Le dossier fin et la base compacte du fauteuil encombrant peu l'espace de travail, ce qui permet à l'équipe soignante de se rapprocher au plus près de la tête du patient. Les fouets équilibrés garantissent une utilisation ergonomique des instruments.



Expérience utilisateur conviviale

L'écran tactile de 7 pouces de l'unit, très simple d'utilisation, permet une navigation sans effort à travers l'interface intuitive. Pour tous ceux qui souhaitent une meilleure visibilité et plus de flexibilité, l'interface peut également être étendue à l'écran tactile interactif Planmeca Halo™. Il rationalise toutes les facettes des tâches cliniques quotidiennes, de la consultation des données patient à la gestion de l'unit dentaire. De plus, le moniteur est un excellent outil pour l'éducation du patient et permet de mettre à jour les dossiers dentaires en temps réel au cours des traitements.



Design séduisant

Au fil des ans, les units dentaires Planmeca ont reçu de nombreux prix de design pour leur conception fonctionnelle et reconnaissable entre mille. Dans un cabinet, un unit dentaire à la conception impeccable et moderne renvoie une image de qualité, renforce le climat de confiance et permet aux patients de se détendre.

L'unit Planmeca Pro50 est doté des meilleurs éléments de conception qui font la réputation de nos produits. Il représente le meilleur du design finlandais : compact, élégant, léger, silencieux, confortable, solide, adaptable et durable.



Planmeca Compact™ i5

Destiné à la performance, conçu pour durer

Epuré et élégant, le **Planmeca Compact™ i5** a été conçu sur la base de plusieurs décennies de recherche et d'expérience. Associant une technologie révolutionnaire à un design somptueux, il répond aux besoins les plus exigeants. Léger mais performant, c'est l'unité dont tout le monde rêve.

Le flux de travail le plus fluide possible

L'unité **Planmeca Compact™ i5** a été conçue pour offrir le flux de travail le plus fluide possible pour toute l'équipe dentaire. Sa conception légère et ses mouvements fluides facilitent le maintien d'une position de travail ergonomique tout au long de la journée. Le fait que tout soit à portée de main rend le travail quotidien plus facile et agréable.

Routines plus rapides pour flux de patients accéléré

Dans l'unité **Planmeca Compact i5**, toutes les fonctions essentielles de contrôle des infections sont intégrées et clairement organisées dans des compartiments distincts. Les procédures de nettoyage sont automatisées, et le témoin à LED sur l'unité dentaire affiche leur statut. Ces fonctions accélèrent le contrôle des infections, ce qui se traduit par un flux de patients plus rapide et une assurance qualité améliorée. **Planmeca Compact i5** est la réponse parfaite aux exigences de plus en plus nombreuses de la dentisterie d'aujourd'hui.

Cinq générations d'amélioration constante

Notre gamme d'unités **Planmeca Compact™ i** compte des dizaines de milliers d'utilisateurs à travers le monde. Ces utilisateurs n'ont cessé de nous fournir de précieux feedbacks qui nous ont permis d'affiner notre unité dentaire pour mieux répondre aux attentes des praticiens d'aujourd'hui et de demain. L'unité **Planmeca Compact i5** est l'aboutissement de cinq générations d'amélioration constante.



« L'élégance de son design est l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi l'unité **Planmeca Compact™ i5**. La plupart des unités dentaires sont encombrantes et lourdes, alors que le mien est très moderne et compact, tout en étant robuste et stable.

Dr Thomas Rosner
Grisons, Suisse



UNE UTILISATION SELON VOS PRÉFÉRENCES

Les préférences de travail sont aussi variées que les praticiens dentaires. Le **Planmeca Compact i5** propose plusieurs systèmes de distribution et un vaste choix d'instruments pour satisfaire vos besoins et exigences spécifiques.

- 1 Bras transthoracique de 520 mm à fouets
- 2 Bras transthoracique de 340 mm à fouets
- 3 Bras transthoracique avec instruments à cordons pendants
- 4 Distribution latérale avec instruments à cordons pendants
- 5 Distribution sur chariot avec instruments à cordons pendants
- 6 Chariot indépendant avec instruments à cordons pendants



Planmeca Compact™ i Classic

Le classique moderne de la dentisterie

L'unit **Planmeca Compact™ i Classic** est le classique moderne de notre gamme d'units dentaires : un choix fonctionnel offrant toutes les fonctions et les instruments dont vous avez besoin pour un flux de tâches fluide. Conçu pour une utilisation simple et conviviale, il rassemble les meilleurs avantages de nos solutions en matière de conception ergonomique et pratique.

Apprentissage facile, utilisation facile

Planmeca Compact™ i Classic est conçu pour offrir un flux de tâches fluide et une utilisation conviviale. Comme tous nos units dentaires, il est doté d'un écran tactile simple et intuitif qui vous guide dans la langue de votre choix et vous permet de régler toutes les fonctions essentielles de l'unit, des instruments et du contrôle des infections. L'unit et les instruments peuvent également être contrôlés directement par la pédale de commande, vous laissant ainsi les mains libres pour le traitement du patient.

Utilisation ergonomique des instruments

Les fouets garantissent un flux de tâches ergonomique : de tout petits mouvements suffisent pour utiliser les instruments. Ceci limite les contraintes sur votre bras, votre poignet et votre épaule. L'unit **Planmeca Compact i Classic** peut, en option, être équipé d'instruments à cordons pendants. Les instruments facilement interchangeables et la maniabilité de la console permettent d'adapter rapidement l'unit aux préférences personnelles.



« La garniture **Ultra Relax™** permet aux patients de se sentir détendus, et ils nous le font souvent remarquer. En tant qu'utilisateur, je me sens parfaitement à l'aise, et l'interface de l'écran tactile est tout simplement idéale pour moi.

Dr Narimen Djerbi
Tunis, Tunisie

Confort de traitement agréable pour le patient

L'unit **Compact i Classic** assure une expérience de traitement agréable, même lors des séances de traitement prolongées. La conception du fauteuil suit les courbes du corps du patient et lui apporte un soutien ferme et confortable, tandis que la tête à double articulation permet de positionner la tête du patient de manière optimale. Des accoudoirs peuvent être installés pour un soutien supplémentaire. La garniture **Ultra Relax™**, composée d'un cuir artificiel durable et d'une mousse viscoélastique à mémoire de forme, garantit un confort supplémentaire.



Planmeca Compact™ i3

Compact, rapide et ingénieux

Nous sommes persuadés qu'une excellente ergonomie, une grande facilité d'utilisation et un flux de tâches fluide doivent être des normes, et non des luxes. Compact, rapide et intelligent, l'unit **Planmeca Compact™ i3** est le choix idéal pour les dentistes à la recherche d'une solution offrant un gain de place. La grande flexibilité de mouvement de son bras de distribution permet aux professionnels dentaires de travailler confortablement dans toutes les positions, qu'ils soient droitiers ou gauchers.

Simplicité sans sacrifier l'efficacité

L'unit **Planmeca Compact™ i3** est conçu pour simplifier la dentisterie du quotidien. Facile à apprendre et à utiliser, il est équipé d'un écran tactile intuitif qui vous guide dans votre langue. Grâce à la simplicité de sa conception, les procédures de contrôle des infections externes sont faciles à réaliser. L'unit peut également être personnalisé selon les préférences et complété par les options de votre choix, telles qu'un scanner intraoral intégré.

Conversion droitier/gaucher en 10 secondes

L'unit **Planmeca Compact i3** peut être configuré pour un gaucher ou un droitier en à peine 10 secondes. Pour cela, il suffit de déplacer la console d'instruments, sans avoir à déplacer le scialytique. Cela en fait une solution pratique pour tous les cabinets où plusieurs dentistes sont susceptibles d'utiliser le même unit dentaire et où l'espace est limité.



Choisissez votre option de distribution préférée



Solution rapide et optimisée pour l'espace

L'unit **Planmeca Compact i3** est un unit dentaire véritablement polyvalent qui s'adapte à tous les agencements de cabinet. Grâce à son profil fin et à son dossier étroit, l'unit encombre peu l'espace de travail, ce qui permet à votre équipe de travailler confortablement, debout ou assis. La petite console d'instruments peut être placée au-dessus du patient, garantissant le maintien d'une posture ergonomique tout au long de la journée. De plus, le pivotement de l'unit permet des réglages plus précis selon vos préférences.

Choix pratique, notamment pour les grands cabinets avec plusieurs utilisateurs

Le système d'ouverture de session unique en son genre, **Planmeca PlanID™**, permet aux dentistes d'accéder instantanément à leurs paramètres personnels sur n'importe quel unit dentaire, simplement en présentant leur carte. Cela permet aux cabinets d'optimiser leurs ressources et d'utiliser leurs équipements avec plus de flexibilité, car les units dentaires ne sont plus exclusivement réservés aux utilisateurs nommés. Toutes les données relatives à l'utilisation sont enregistrées dans le logiciel **Planmeca Romexis®**. Ainsi, les grands cabinets et les chaînes de cabinets peuvent savoir quand, comment et par qui l'unit a été utilisé.

Unit dentaire ultra-flexible

- Conversion droitier/gaucher en 10 secondes
- Large amplitude de mouvement du bras de distribution
- Grand espace de travail tout autour de l'unit
- Positions de travail confortables, de 7 heures à 3 heures
- Pivotement pour des réglages précis



Idéal pour la dentisterie à deux ou à quatre mains



« **Planmeca Compact™ i3** est ergonomique, confortable, facile à utiliser et doté d'une grande amplitude de mouvement. J'ai eu des problèmes d'épaule, je cherchais un unit transthoracique, et **Planmeca** m'a offert la meilleure solution. J'aime la beauté et la simplicité du design. La conversion droitier/gaucher est également très pratique.

Dr Esther Azoulay
Paris, France

Planmeca Pro50™ Chair

Offrez à vos patients le confort haut de gamme

Le fauteuil **Planmeca Pro50™ Chair** allie à la perfection fonctionnalité, flexibilité et ingéniosité, le tout proposé dans un magnifique design intemporel. C'est une option idéale si vous êtes à la recherche d'un fauteuil à la fois robuste et léger, offrant un confort ultime aux patients comme à l'équipe soignante. Prenez place et appréciez !

Robuste et silencieux

Le fauteuil **Planmeca Pro50™ Chair** allie modernité et intemporalité, avec toutes les caractéristiques de légèreté et de design élégant qui font la réputation des produits Planmeca. Ses moteurs internes de qualité médicale assurent un fonctionnement silencieux, contribuant ainsi à maintenir un environnement de travail calme pour l'équipe soignante et à offrir une expérience de traitement relaxant pour le patient. Fabriqué en aluminium durable, le fauteuil est proposé avec une garniture confortable dans une large palette de couleurs vives et attrayantes.

Ergonomie de premier ordre

Planmeca Pro50 Chair se caractérise par sa vaste plage de réglages de la hauteur pouvant varier de 39 cm à 89 cm. Le fauteuil convient ainsi à tous les utilisateurs, à tous les modes de travail et permet aux praticiens de travailler aussi bien assis (sur un siège classique ou de type selle) que debout, quelle que soit leur taille. Sa base réduite laisse suffisamment de place aux jambes du praticien et de l'assistante, ainsi qu'à la pédale de commande du fauteuil et à d'autres dispositifs. Ce gain de place, associé au dossier fin et étroit, permet à l'équipe soignante de s'approcher au plus près du patient tout en maintenant une position ergonomique optimale.

Flux de travail fluide et flexible

Grâce au mécanisme de levage unique du fauteuil, le praticien travaillant à 12 heures avec un meuble ou un plateau peut être assuré que la distance entre la tête et le meuble reste constante, quelle que soit la hauteur du fauteuil, et que le scialytique n'a pas besoin d'être réajusté en cas de changement de la hauteur du fauteuil. De plus, le fauteuil peut être équipé d'une base mobile en option, ce qui permet de le déplacer très facilement d'une salle de traitement à une autre, en cas de besoin.



Installez-vous
confortablement !

Très confortable pour le patient

Planmeca Pro50 Chair dispose d'un repose-jambes rabattable, qui facilite l'entrée et la sortie du patient et permet un échange en face-à-face avec le praticien. Cette position est particulièrement appréciée lors des consultations pré et post-traitement. Conçu pour supporter un poids maximal de 185 kg, le fauteuil peut accueillir des patients de toutes corpulences et tailles. La garniture **Ultra Relax™** à mémoire de forme s'adapte parfaitement à la morphologie des patients, ce qui leur permet de rester détendus, même pendant les séances de traitement longues.

Qualité finlandaise

Tous les produits Planmeca sont conçus et fabriqués en Finlande, dans notre propre usine, en utilisant les technologies les plus récentes et les matériaux de qualité supérieure. Forts de plusieurs décennies d'expérience dans la conception et la fabrication de fauteuils dentaires, nous prêtons une attention particulière aux retours de nos clients pour améliorer et perfectionner constamment nos produits, qui sont toujours fabriqués dans des conditions de travail équitables.

Caractéristiques techniques

Données techniques

	Planmeca Pro50	Planmeca Compact i5	Planmeca Compact i Classic	Planmeca Compact i3	Planmeca Pro50 Chair
Puissance requise	100–240 VAC	100 VAC, 115 VAC, 220–240 VAC	100 VAC, 115 VAC, 220–240 VAC	100 VAC, 115 VAC, 220–240 VAC	100–240 VAC
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pression de l'entrée d'eau	300–900 kPa	300–900 kPa	300–900 kPa	300–900 kPa	-
Pression de l'entrée d'air	550–900 kPa	550–900 kPa	550–900 kPa	550–900 kPa	-
Poids	220 kg	160 kg	150 kg	130 kg	88 kg
Montage	Fixation au sol	Fixation au sol	Fixation au sol	Fixation au sol	Fixation au sol Version mobile en option
Cadre	Alliage d'aluminium moulé	Alliage d'aluminium moulé	Alliage d'aluminium moulé	Alliage d'aluminium moulé	Alliage d'aluminium moulé
Couleur	Blanc (RAL 9016)	Blanc (RAL 9016)	Blanc (RAL 9016)	Blanc (RAL 9016)	Blanc (RAL 9016)

 Planmeca Oy
CE 0598  Planmeca Pro50

 Planmeca Oy
CE 0598  Planmeca Compact i



 Planmeca Oy
CE  Planmeca Pro50 Chair

Comparison

	Planmeca Pro50	Planmeca Compact i5	Planmeca Compact i Classic	Planmeca Compact i3	Planmeca Pro50 Chair
Type de bras porte-instruments					
Bras transthoracique de 520 mm à fouets	✓	✓	✓	✓	
Bras transthoracique de 340 mm à fouets	✓	✓	✓	✓	
Bras transthoracique avec instruments à cordons pendants		✓	✓	✓	
Distribution latérale avec instruments à cordons pendants		✓			
Distribution sur chariot avec instruments à cordons pendants		✓		✓	
Chariot indépendant avec instruments à cordons pendants		✓			
Caractéristiques de l'unit dentaire					
Ambidextre	✓	✓	✓	✓	
Fauteuil flottant		✓	✓		
Fauteuil monté au sol	✓			✓	✓
Repose-jambes automatique	✓	✓	✓		✓
Pivotement du fauteuil				✓	
Garniture Ultra Relax™	✓	✓	✓	✓	✓
Garniture Comfy™	✓	✓	✓	✓	✓
Cuvette	✓	✓	✓		
Instruments et autres options					
5 emplacements d'instruments	✓	✓	✓	✓	
Emplacements d'instruments interchangeables (sauf celui de la seringue)	✓	✓	✓	✓	
Micromoteur d'implantologie intégré		✓	✓	✓	
Micromoteur endodontique intégré	✓	✓	✓	✓	
Localisateur d'apex intégré		✓	✓	✓	
Scanner intraoral intégré		✓	✓	✓	
Écran tactile interactif Planmeca Halo™	✓				
Interface utilisateur à écran tactile	✓	✓	✓	✓	
Profils d'utilisateur pour plusieurs utilisateurs	✓	✓	✓	✓	
Pédale de commande sans fil		✓	✓		
Permet le montage d'une radio rétroalvéolaire		✓	✓		
Fonctions de contrôle des infections					
Supports de nettoyage intégrés	✓	✓	✓		
Nettoyage périodique des conduites d'eau	✓	✓	✓	✓	
Désinfection continue de l'eau		✓	✓		
Système de nettoyage des tuyaux d'aspiration automatisé (les tuyaux d'aspiration sont complètement remplis)	✓	✓	✓		
Nettoyage des tuyaux d'aspiration manuel (aspiration à travers les tuyaux)				✓	✓
Récipients intégrés pour les désinfectants	✓	✓			
Mise en réseau					
Contrôle et diagnostic à distance avec le module Planmeca Romexis® Clinic Management		✓	✓	✓	

Planmeca Pro50™



Dimensions

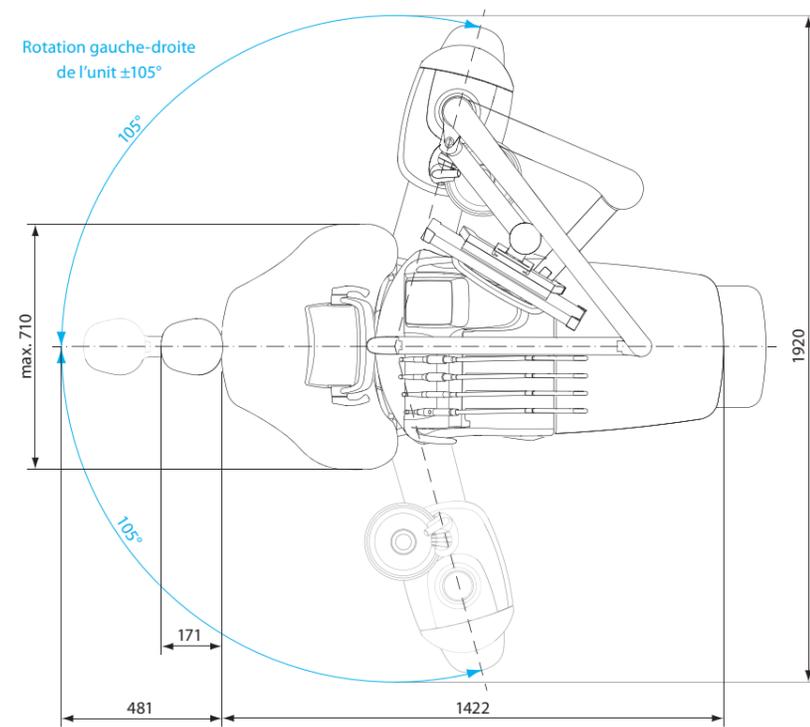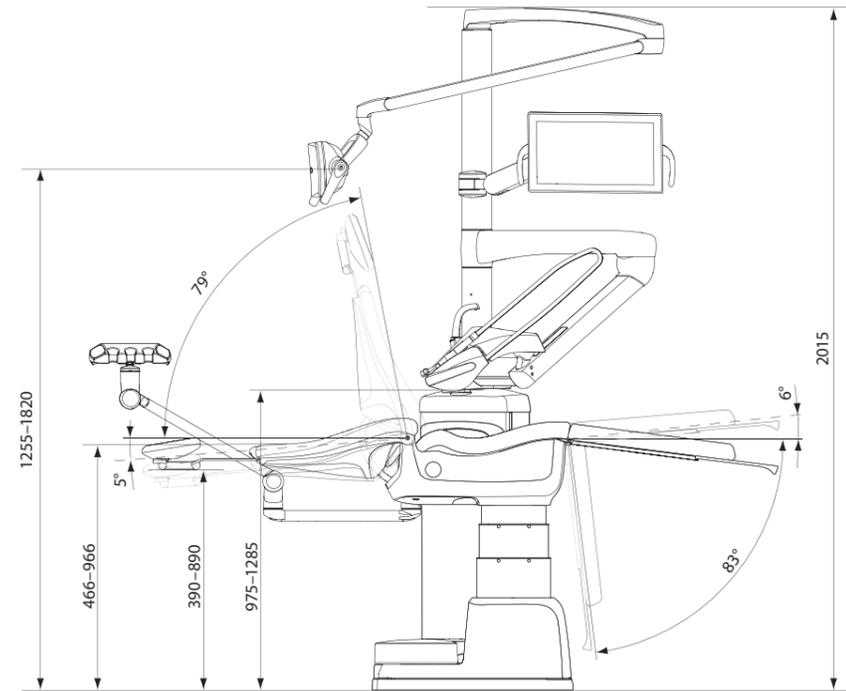

Planmeca Compact i5, Planmeca Compact i Classic

Dimensions


- Bras transthoracique à fouets
 - Planmeca Compact i5
 - Planmeca Compact i Classic
- Bras transthoracique avec instruments à cordons pendants
 - Planmeca Compact i5
 - Planmeca Compact i Classic
- Distribution latérale avec instruments à cordons pendants
 - Planmeca Compact i5

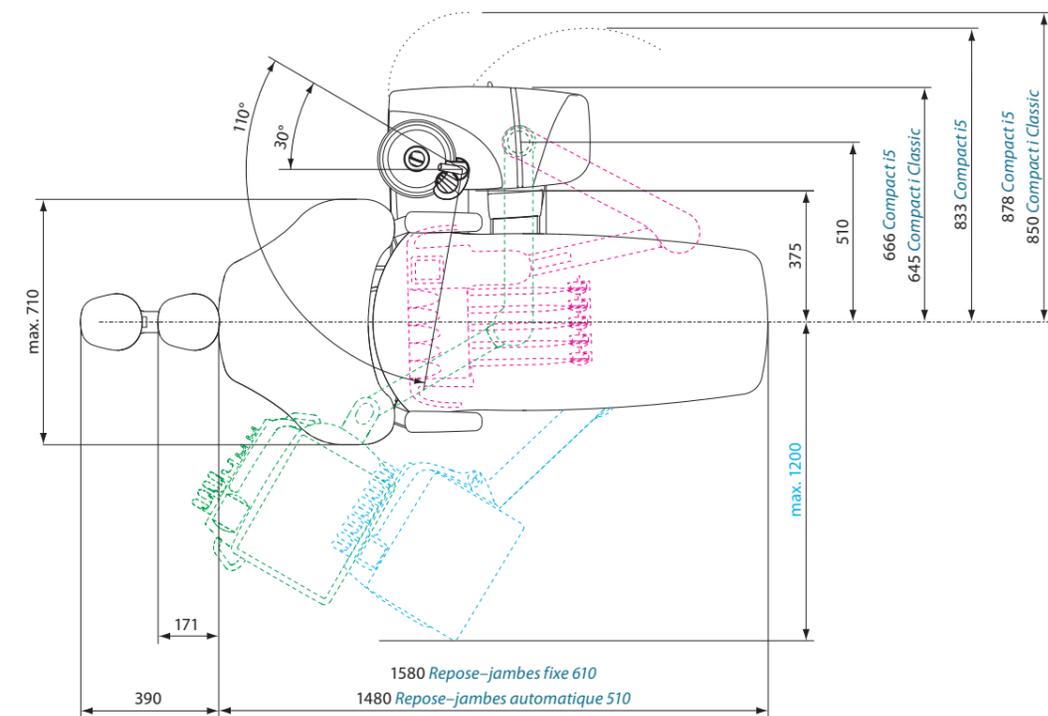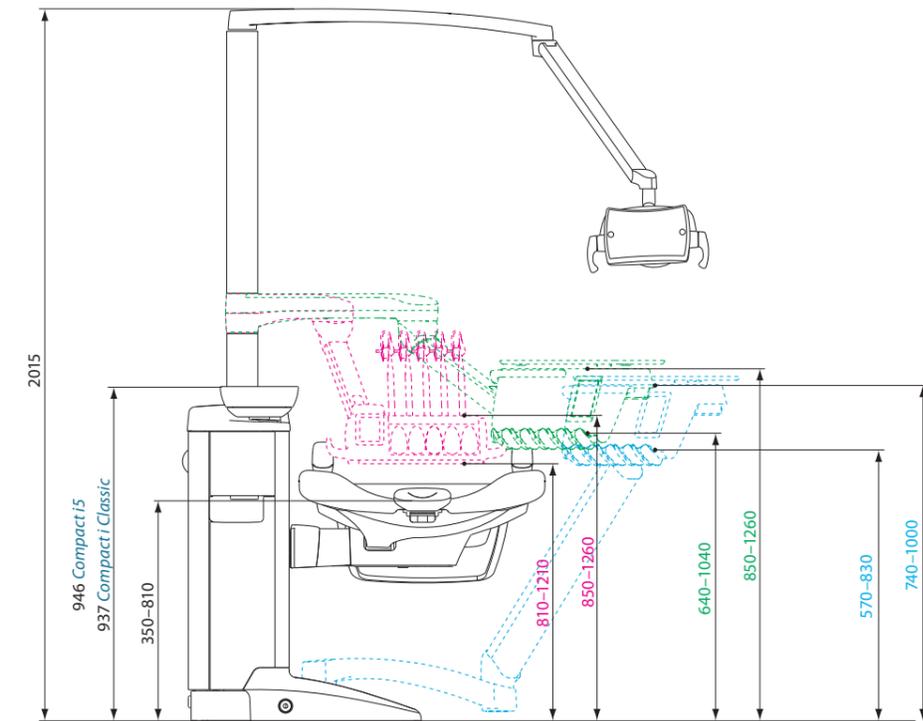

Planmeca Compact i3


Dimensions

Bras transthoracique à fouets

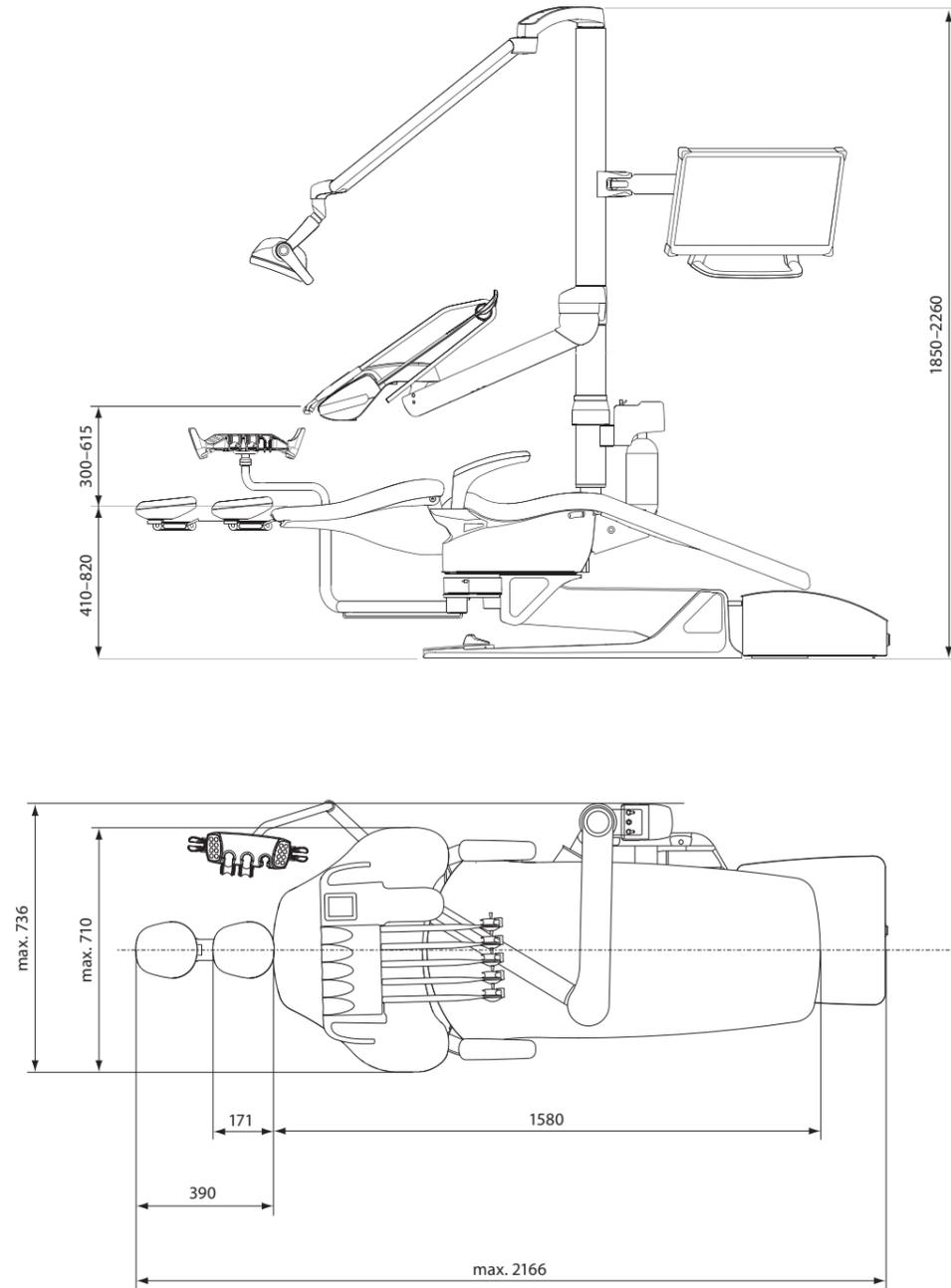

Planmeca Pro50™ Chair

Dimensions

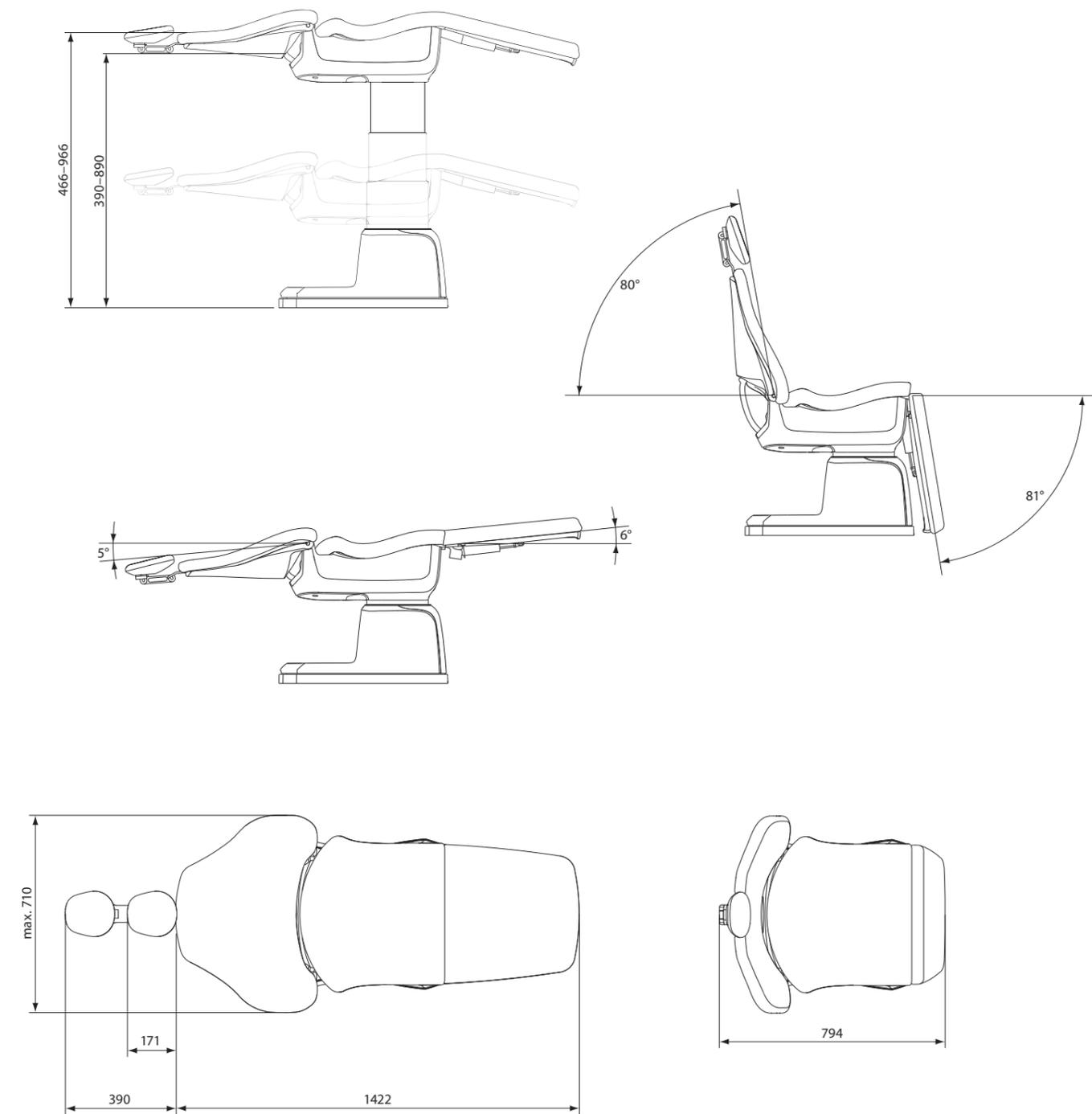



Romexis

Le logiciel tout-en-un

Planmeca Oy conçoit et fabrique une gamme complète d'équipements innovants de diagnostic et de traitement pour la santé, comprenant des dispositifs d'imagerie 2D et 3D, des solutions CAD/CAM, des unités et des logiciels de soins dentaires. Planmeca Oy, la société mère du Groupe Planmeca finlandais, est fortement engagée dans l'innovation au service de l'amélioration des soins. Elle est la plus grande société privée dans ce domaine.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !



PLANMECA

Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finlande | tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555 | sales@planmeca.com | www.planmeca.fr

Les images peuvent contenir des articles supplémentaires, non compris dans une livraison standard.
Les configurations et caractéristiques peuvent varier d'un pays ou d'un endroit géographique à un autre. Droits de changement réservés.

Planmeca, All in one, Anatomic Plus, Cobra, Comfy, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Flexy, Perio Fresh, PlanEasyMill, Planmeca 4D, Planmeca AINO, Planmeca ARA, Planmeca CAD/CAM, Planmeca CALM, Planmeca Cariosity, Planmeca Chair, Planmeca Clarify, Planmeca Compact, Planmeca ConBo, Planmeca CORE, Planmeca Creo, Planmeca Emerald, Planmeca FIT, Planmeca Imprex, Planmeca Intra, Planmeca iRomexis, Planmeca Lumion, Planmeca Lumo, Planmeca Maximity, Planmeca Minea, Planmeca Minendo, Planmeca Minetto, Planmeca mRomexis, Planmeca Noma, Planmeca Olo, Planmeca Online, Planmeca Piezon, Planmeca PlanCAD, Planmeca PlanCAM, Planmeca PlanClear, Planmeca PlanDesk, Planmeca PlanID, Planmeca PlanMill, Planmeca Planosil, Planmeca PlanPure, Planmeca PlanScan, Planmeca PlanView, Planmeca Pro50, Planmeca ProCeph, Planmeca ProFace, Planmeca ProID, Planmeca ProMax, Planmeca ProModel, Planmeca ProOne, Planmeca ProScanner, Planmeca ProSensor, Planmeca ProX, Planmeca Romexis, Planmeca Serenus, Planmeca SingLED, Planmeca SmartGUI, Planmeca Solanna, Planmeca Sovereign, Planmeca Ultra Low Dose, Planmeca Verity, Planmeca Vision, Planmeca Viso, Planmeca Waterline Cleaning System, Planmeca Xtremity, Proline Dental Stool, ProTouch, SmartPan, SmartTouch, Trendy et Ultra Relax sont des marques déposées ou non déposées de Planmeca dans différents pays.

10053135/0525/fr